



Traitement des plaies par pression négative

Consignes d'application et preuve clinique



Tout le monde a le pouvoir de guérir

www.endoform.com

Traitement des plaies par pression négative


Preuve clinique

La combinaison Endoform® plus TPPN permet de réduire le temps de guérison


Étude prospective cas-témoin sur les ulcérations chroniques du pied diabétique.

N = 10 UPD – Endoform® plus TPPN vs
N = 10 UPD – TPPN seul.

L'ajout d'Endoform® en combinaison avec le TPPN a permis de réduire le temps de fermeture des plaies de 18 % (1,3 semaine).

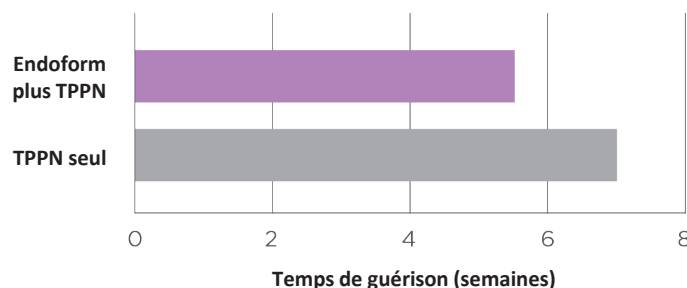

Débridement excisionnel antérieur d'une plaie dorsale médiane infectée du pied. Débridement hebdomadaire avec application d'Endoform® plus TPPN

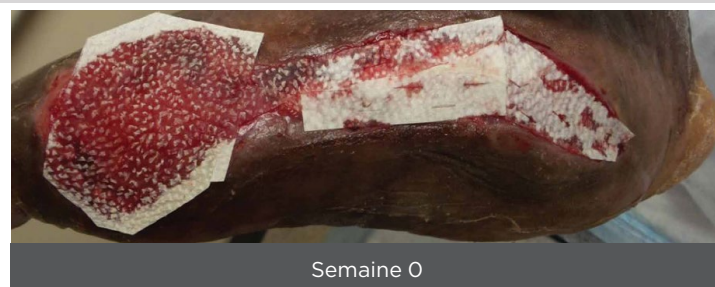

Vidovic, G. and P. Sykes (2016). The use of an ovine collagen extracellular matrix dressing in conjunction with negative pressure wound therapy in the management of chronic diabetic foot ulcers. Symposium on Advanced Wound Care - Fall, Las Vegas, NV.



Endoform® – High Flow : avec des ouvertures plus grandes pour les plaies dont le niveau d'exsudat est variable

- Idéal pour une utilisation avec le traitement des plaies par pression négative (TPPN).
- Offert pour les versions Natural et Antimicrobial.



Traitement des plaies par pression négative

Preuve clinique

Amputation trans-métatarsienne

Femme diabétique de 55 ans. Résection partielle des 3^e et 4^e rayons. Endoform® plus TPPN pendant trois semaines, puis Endoform® seul. Épithélialisation à 100 % à la semaine 19.



Silverman, A. and G. Valentine (2018). Use of Ovine Extracellular Matrix in Post-Surgical Wounds: A Case Series. Symposium for Advanced Wound Care - Fall, Las Vegas, NV.



Déformation de Charcot

Homme diabétique de 55 ans. Plaie de deux ans non cicatrisée résultant d'une déformation de Charcot. Deux semaines de prise en charge avec Endoform®, plus TPPN, puis Endoform® seul. Plaie refermée à la semaine 27.



Silverman, A. and G. Valentine (2018). Use of Ovine Extracellular Matrix in Post-Surgical Wounds: A Case Series. Symposium for Advanced Wound Care - Fall, Las Vegas, NV.



Traitement des plaies par pression négative

Preuve clinique

Syndrome des loges compartimental

Femme de 70 ans Coronaropathie, diabète, hypercholestérolémie et maladie vasculaire périphérique. A subi une fasciectomie, puis Endoform® plus TPPN pendant trois semaines.



Semaine 0



Semaine 3



Semaine 7

Avec l'aimable autorisation du Dr Naz Wahab, MD, Las Vegas, NV (2019).

Ulcère du pied diabétique – gangrène humide

Femme de 70 ans Diabète, neuropathie périphérique, maladie artérielle périphérique, hypertension, insuffisance rénale terminale et en hémodialyse. Prise en charge avec Endoform® plus TPPN pendant huit semaines, puis Endoform® seul. Plaie refermée à la semaine 24.



Semaine 0



Semaine 5



Semaine 8



Semaine 24

Silverman, A. (2017). Use of an Ovine Collagen with an Intact Extracellular Matrix (CECM) and negative pressure wound therapy (NPWT) as part of the wound management plan following limb salvage surgical intervention in high risk diabetic foot ulcers. Symposium on Advanced Wound Care - Spring, San Diego, CA.



Amputation de l'hallux gauche

Femme diabétique de 65 ans L'amputation du gros orteil gauche a entraîné une infection et une amputation partielle subséquente du métatarse. Prise en charge avec Endoform® plus TPPN pendant six semaines, puis Endoform® seul. Plaie refermée à la semaine 16.



Semaine 0



Semaine 3



Semaine 6



Semaine 16

Silverman, A. (2017). Use of an Ovine Collagen with an Intact Extracellular Matrix (CECM) and negative pressure wound therapy (NPWT) as part of the wound management plan following limb salvage surgical intervention in high risk diabetic foot ulcers. Symposium on Advanced Wound Care - Spring, San Diego, CA.



Traitement des plaies par pression négative Preuve clinique

Déhiscence de la paroi abdominale

Homme de 56 ans avec une incision médiane déhiscence. Application d'Endoform® sur les zones affaiblies, puis TPN. Les zones affaiblies se sont rétablies à la semaine 12.



Gatan Mendoza, J., J. Landi and R. Rock (2018). The concurrent Use of Ovine Collagen Extracellular Matrix Dressing with Negative Pressure Wound Therapy on Three Acute Surgical Wounds. Symposium on Advanced Wound Care, Charlotte, NC.



Abcès ayant une culture positive au SARM

Abcès ayant une culture positive à SARM situé sur la face postérieure de la cuisse droite. Débridement chirurgical des tissus nécrotiques, puis hydrogel d'argent pendant une semaine. Endoform® plus TPN pendant quatre semaines. Plaie refermée à la semaine 10.



Curran, M., C. Rodriguez, O. J. Altschul, A. Fragen and F. Ercoll (2013). The Use of collagen dermal template with an ECM in various wounds in acute care and outpatient wound care settings. The Symposium on Advanced Wound Care, Denver, CO



Déhiscence secondaire à l'ostéomyélite

Le patient présentait une déhiscence de la plaie, secondaire à une ostéomyélite du crâne. Application d'Endoform® plus TPN. Le tissu de granulation rouge a comblé l'espace de la plaie dès la deuxième semaine.



Curran, M., C. Rodriguez, O. J. Altschul, A. Fragen and F. Ercoll (2013). The Use of collagen dermal template with an ECM in various wounds in acute care and outpatient wound care settings. The Symposium on Advanced Wound Care, Denver, CO



Traitement des plaies par pression négative

Consignes d'application



Étape 1 – Appliquer Endoform® et réhydrater



Étape 2 – Couche de contact non adhérente



Étape 3 – Mousse et pansement de TPPN

Silverman, A. and G. Valentine (2018). Use of Ovine Extracellular Matrix in Post-Surgical Wounds: A Case Series. Symposium for Advanced Wound Care - Fall, Las Vegas, NV.



Étape 1 – Appliquer Endoform® et réhydrater



Étape 2 – Couche de contact non adhérente



Étape 3 – Mousse et pansement de TPPN

Zilberman, I. and N. Zolfaghari (2016). Innovative solutions in the management of wounds with exposed tendons utilizing ovine collagen extracellular matrix and gentian violet and methylene blue antibacterial foams. Symposium on Advanced Wound Care - Atlanta, GA.



Sous ordonnance seulement. Avant l'utilisation, assurez-vous de lire le mode d'emploi complet fourni avec le produit.

Pour toute question concernant le produit, tout besoin d'échantillons ou toute question clinique détaillée sur nos produits aux États-Unis, veuillez communiquer avec nous au +1 877 627-6224.

Endoform® est une marque déposée d'Aroa Biosurgery Limited.



AROA

Fabriqué pour :
AROA BIOSURGERY INC

7220 Trade Street, Suite 306, San Diego, CA
92121 É.-U.

+1-877-627-6224

www.endoform.com

MKT.1437-CA-FR.00 | Septembre 2021