

Myriad Matrix™

Soft Tissue Bioscaffold

Myriad Matrix™ è specificamente progettata per la ricostruzione chirurgica dei tessuti molli e le ferite complesse

Myriad Matrix™ combina strati di matrice extracellulare (ECM) **ARO A ECM™** con perforazioni ingegnerizzate per facilitare un'infiltrazione e una migrazione rapide delle cellule.

ARO A ECM™ fornisce uno scaffold biologico noto per supportare l'infiltrazione e la migrazione delle cellule.¹

I canali vascolari naturali facilitano l'angiogenesi.²

Le perforazioni e gli spazi interstiziali ingegnerizzati facilitano l'accesso cellulare e la migrazione laterale delle cellule.


Myriad Matrix™ contiene una vasta rete di canali vascolari residui per supportare la migrazione delle cellule endoteliali.²

Myriad Matrix™ consente una copertura immediata di ossa, tendini e strutture vitali esposti, per facilitare la costruzione di nuovo tessuto di granulazione. Supporta inoltre la crescita di tessuto di granulazione solido e ben vascolarizzato per la riuscita di un innesto cutaneo a spessore parziale (STSG).^{3,4}



Myriad Matrix™

Soft Tissue Bioscaffold

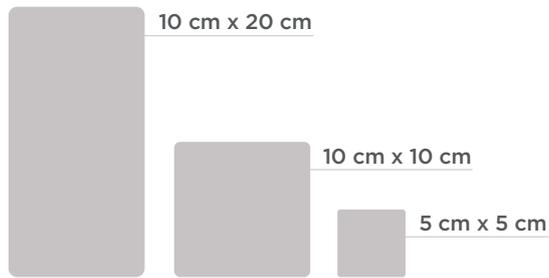

Informazioni per gli ordini

Myriad Matrix™ - 3 strati (ca. 1,0 mm)		
N. articolo	Dimensioni prodotto (L x P)	Quantità/Scatola
SR03LG0505US	5 x 5 cm	1
SR03LG1010US	10 x 10 cm	1
SR03LG1020US	10 x 20 cm	1

Myriad Matrix™ - 5 strati (ca. 1,5 mm)		
N. articolo	Dimensioni prodotto (L x P)	Quantità/Scatola
SR05LG0505US	5 x 5 cm	1
SR05LG1010US	10 x 10 cm	1
SR05LG1020US	10 x 20 cm	1



1. Lun, S., et al., *A functional extracellular matrix biomaterial derived from ovine forestomach*. Biomaterials, 2010. 31(16): p. 4517-29.
2. Irvine, S.M., et al., *Quantification of in vitro and in vivo angiogenesis stimulated by ovine forestomach matrix biomaterial*. Biomaterials, 2011. 32(27): p. 6351-61. 2011;32(27):6351-61.
3. Bohn, G. A. e A. E. Chaffin (2020). "Extracellular matrix graft for reconstruction over exposed structures: a pilot case series." *J Wound Care* 29(12): 742-749.
4. Chaffin, A. E. e M. C. Buckley (2020). "Extracellular matrix graft for the surgical management of Hurley stage III hidradenitis suppurativa: a pilot case series." *J Wound Care* 29(11): 624-630.

Prima dell'uso, assicurarsi di leggere integralmente il foglio illustrativo delle Istruzioni per l'uso fornito con il prodotto. Consultare il rappresentante di vendita di zona per informazioni specifiche sul proprio Paese.



S4M EUROPE
59 Rue Castellion
01100 OYONNAX
France



AROA BIOSURGERY LTD.

64 Richard Pearse Drive, Māngere,
Auckland 2022, New Zealand
www.aroabio.com

©2021 Aroa Biosurgery Limited

MKT.1669-IT.00 | July 2021

AROA™, Myriad Matrix™ e AROA ECM™ sono marchi commerciali di Aroa Biosurgery Limited.